



Læs hele brugsanvisningen til Enerzair Breezhaler inhalatoren før brug.

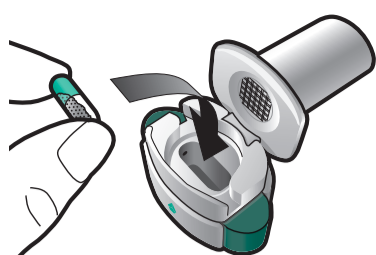


Læg en kapsel i

1

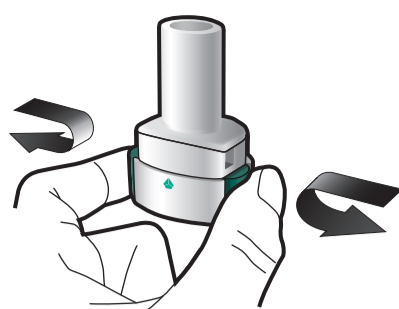


Perforer og slip

2

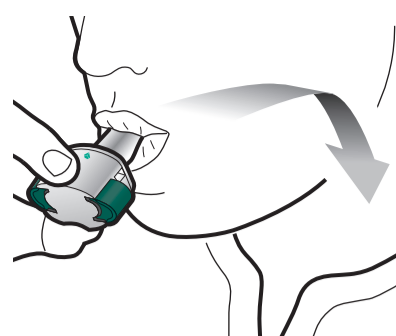


Inhaler dybt

3

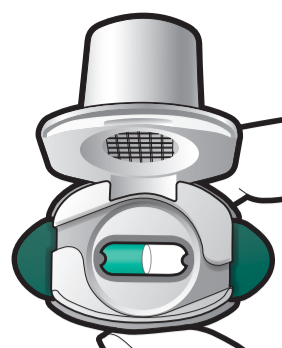


Tjek at kapslen er tom


Tjek

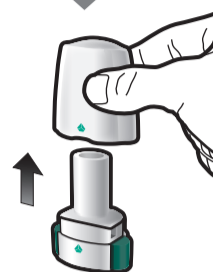


Trin 1 a:  
**Fjern hættten**

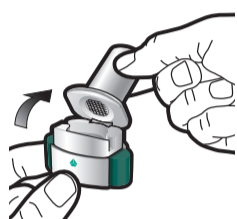


Trin 1b:  
**Åbn inhalatoren**

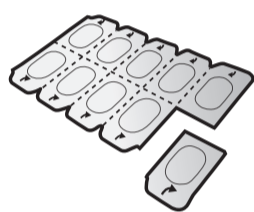


Trin 1c:  
**Fjern kapslen**  
Adskil en blister fra blisterkortet. Åbn blisteren og fjern kapslen. Tryk ikke kapslen gennem folien. Kapslen må ikke synkes.

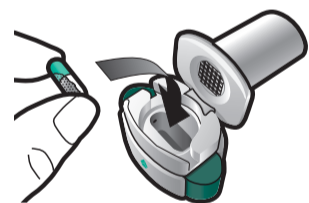

Trin 1d:  
**Læg kapslen i kapselkammeret**  
Læg aldrig en kapsel direkte i mundstykket.

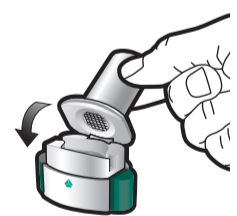

Trin 1e:  
**Luk inhalatoren**

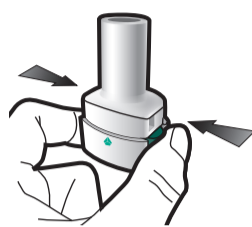

Trin 2a:  
**Perforer kapslen én gang**  
Hold inhalatoren lodret. Perforer kapslen ved samtidig at trykke begge sideknapper helt ind. Du vil høre et klik, når kapslen perforeres. Perforer kun kapslen én gang.



Trin 2b:  
**Slip sideknapperne helt**



Trin 3a:  
**Tag en dyb udånding**  
Du må ikke puste i mundstykket.




Trin 3b:  
**Inhaler medicinen dybt**  
Hold inhalatoren som vist på billedet. Tag mundstykket i munden, og luk læberne tæt omkring det. Tryk ikke på sideknapperne. Tag en hurtig og så dyb indånding som muligt. Under inhalationen vil du høre en snurrende lyd. Du kan muligvis smage medicinen, mens du inhalerer.



Trin 3c:  
**Hold vejret**  
Hold vejret i op til 5 sekunder.

Trin 3d:  
**Skyl munden**  
Skyl munden med vand efter hver dosis, og spyt det ud.

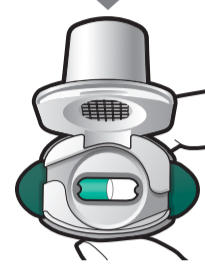


**Tjek at kapslen er tom**  
Åbn inhalatoren for at kontrollere, om der er overskydende pulver i kapslen.

Hvis der er overskydende pulver i kapslen:

- Luk inhalatoren.
- Gentag trin 3a til 3d.



**Overskydende pulver**

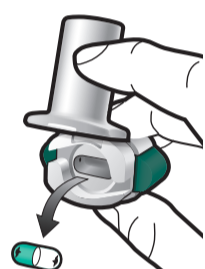


**Fjern den tomme kapsel**  
Smid kapslen ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Luk inhalatoren, og sæt hættten på igen.

#### Viglig information

- Enerzair Breezhaler kapsler skal altid opbevares i den originale blister og må først tages ud umiddelbart inden anvendelse.
- Tryk ikke kapslen gennem folien for at fjerne den fra blisterkortet.
- Kapslerne må ikke synkes.
- Brug ikke Enerzair Breezhaler kapsler med nogen anden inhalator.
- Brug ikke Enerzair Breezhaler inhalatoren til at tage anden kapsel-medicin.
- Læg aldrig kapslen direkte i munden eller i inhalatorens mundstykke.
- Tryk ikke på sideknapperne mere end én gang.
- Pust ikke ind i mundstykket.
- Tryk ikke på sideknapperne, mens du inhalerer gennem mundstykket.
- Håndter ikke kapslerne med fugtige hænder.
- Vask aldrig din inhalator med vand.

Din Enerzair Breezhaler-inhalator-pakning indeholder:

- En Enerzair Breezhaler inhalator
- Et eller flere blisterkort, som hver indeholder 10 Enerzair Breezhaler-kapsler til brug i inhalatoren.

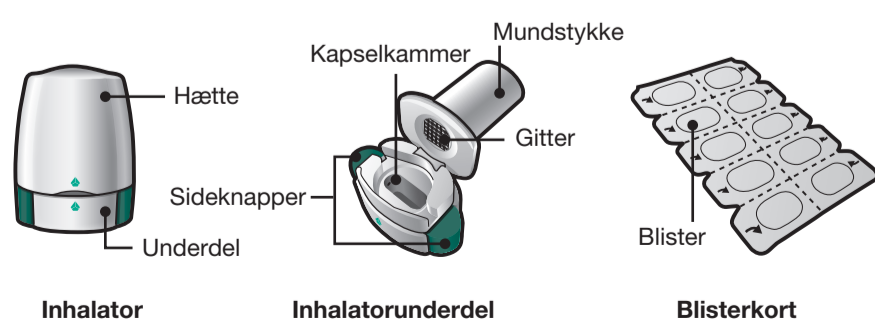

Inhalator

Inhalatorunderdel

Blisterkort

#### Ofte stillede spørgsmål

##### Hvorfor lavede inhalatoren ikke en lyd, da jeg inhalerede?

Kapsel kan muligvis sidde fast i kammeret. Hvis dette er tilfældet, skal du forsigtigt løsne kapslen ved banke let på inhalatorens underdel. Inhaler medicinen igen ved at gentage trin 3a til 3d.

##### Hvad skal jeg gøre, hvis der er overskydende pulver i kapslen?

Du har ikke fået en tilstrækkelig mængde af din medicin. Luk inhalatoren, og gentag trin 3a til 3d.

##### Jeg hostede, efter jeg inhalerede – betyder det noget?

Dette kan forekomme. Så længe at kapslen er tom, har du fået en tilstrækkelig mængde af din medicin.

##### Jeg kunne mærke små stykker af kapslen på min tunge – betyder det noget?

Dette kan forekomme, og det er ikke farligt. Risikoen for, at kapslen går i små stykker, forøges, hvis kapslen perforeres mere end én gang.

#### Rengøring af inhalatoren

Tør inderside og yderside af mundstykket med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne eventuelle pulverrester. Hold inhalatoren tør. Vask aldrig din inhalator med vand.

#### Bortskaffelse af inhalator efter brug

Hver inhalator skal bortskaffes, når alle kapslerne er brugt. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe inhalatorer ifølge de lokale retningslinjer.